

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff



variana

Das demontier- und waschbare Pflegebett





variana

Das demontier- und waschbare Pflegebett


Der weltweite Pflegemarkt unterliegt unterschiedlichen Herausforderungen und Einflussfaktoren, insbesondere dem steigenden Anteil an pflegebedürftigen Personen in Alten- und Kurzzeitpflege. Dies stellt nicht nur Betreiber und Pflegekräfte in Altenheimen vor wachsende qualitative und wirtschaftliche Herausforderungen, sondern auch die Angehörigen der zu pflegenden Personen, welche sich für ihre Liebsten die bestmögliche Umgebung und Pflege wünschen.

Gefragt sind Konzepte und Produkte, welche durch hohe Flexibilität die Pflege erleichtern, ökonomisch überzeugen und einen Standard an Wohnlichkeit und Design aufweisen, um den hohen Ansprüchen von Angehörigen und Pflegebedürftigen zu entsprechen.

Das variana Pflegebett kombiniert genau diese funktionell flexiblen Elemente mit Wirtschaftlichkeit und Design.

Prognose zur Entwicklung von Pflegebedürftigkeit weltweit*

Menschen in Millionen

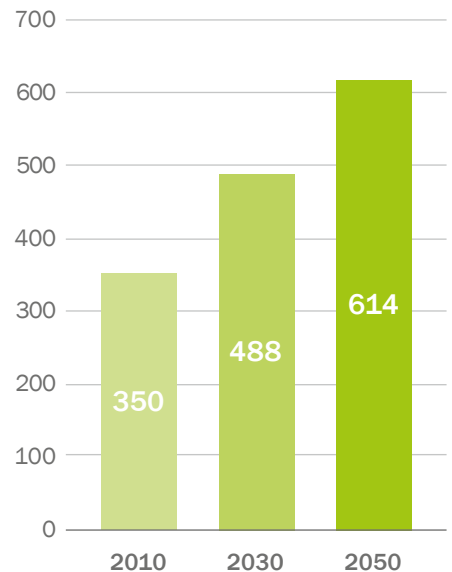

* Statista GmbH 2021
(<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/274028/umfrage/anzahl-pflegebeduerftiger-menschen-nach-weltregion/>)

Über
90%
der Materialien in
unseren Pflegebetten
sind recyclebar

Über
40%
der Materialien in
unseren Pflegebetten
sind bereits recycelt



In der heutigen Zeit wird ein Pflegebett aber nicht nur an der Wirtschaftlichkeit, dem Design oder der Funktionalität gemessen. In fast allen Bereichen der Gesellschaft spielt auch die Nachhaltigkeit von Produkten eine immer größere Rolle.

wissner-bosserhoff hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Ansprüche nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Da unsere Pflegebetten zu einem Großteil aus recyclebarem Material gefertigt sind, leisten wir einen effektiven Beitrag bzgl. Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

variana

Das demontier- und waschbare Pflegebett






Intuitive Bedienung

Der waschbare Handschalter der variانا Pflegebetten besteht durch eine intuitive Bedienbarkeit und gute Übersicht. Die bei Betätigung beleuchteten Tasten, ermöglichen eine einfache Bedienung auch bei Nacht.



Erweiterte Funktionen

Sperrung einzelner Funktionen ist schnell und einfach über Tastenkombination möglich

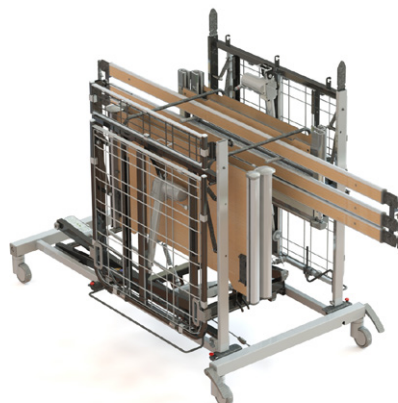

Demontage

Das Bett lässt sich in wenigen Schritten werkzeuglos demontieren und anschließend ohne Probleme transportieren. Die demontierten Teile können einfach auf dem Unterrahmen befestigt und so leicht verfahren werden.

SafeFree® Flex

Seitensicherungen so individuell wie Ihr Bedarf

Ergänzend zu den durchgehenden Seitensicherungen bietet das variana mit den geteilten SafeFree® Flex Seitensicherungen eine wohnliche Alternative, die so viel Freiheit wie möglich und so viel Schutz wie nötig bietet und darüber hinaus eine echte Unterstützung bei der Mobilisierung darstellt. Zudem lassen sich die Seitensicherungen des variana je nach Bedarf einfach konfigurieren. Alle Seitensicherungen sind werkzeuglos und schnell demontierbar und können jederzeit nachgerüstet werden.

Safe

Vollständiger Schutz



- Sichere Befestigung der Elemente
- Verhindert unbeabsichtigtes Lockern oder Entfernen der Seitenelemente
- Werkzeuglos demontierbar

Flexible Mobilisierung



- Optimale Länge und individuell einstellbare Höhe
- Hüftschutz beim Schlafen sowie komfortable und ergonomische Mobilisation des Bewohners



Nachhaltigkeit
Die Materialien unserer Seitensicherungen sind zu über 90% recyclebar



Free – weniger FeM*

Vollständig geteilt



- Bewusstes „Weglassen“ von Seitensicherungen
- Investitionssicherheit für den Betreiber, Rechtssicherheit bzgl. FeM für das Pflegepersonal bzw. die Angehörigen

Halbseitig geteilt



- Einseitig geteilte SafeFree® Flex Seitensicherungen & einseitig durchgehende Alu-Seitensicherungen
- Vollständig waschbare Seitenteile

Vollständig durchgehend



- Beidseitig durchgehende Alu-Seitensicherungen
- Vollständig waschbare Seitenteile

Mehr Wirtschaftlichkeit

Bedarfsgerechte Flexibilität

So flexibel die Anbringung der Seitenelemente ist, so flexibel kann das Budget eingesetzt werden. Alternativ zu unseren komplett waschbaren Seitenelementen sowie den waschbaren Kopf- und Fußteilen, kann das Bett auch mit wohnlichen Holzumrandungen ausgestattet werden.



Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik

Mit uns haben Sie einen verlässlichen Partner bei der Vermeidung von FeM: Mit SafeSense® präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FeM unterstützt.

Es ist mit einer Nachtlicht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt.

SafeSense® ist kompatibel mit marktüblichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrüstbar für unsere Pflegebetten ab 2002.



Nachtlicht-Automatik

- Nachtlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt

Individuelle Rufmeldung


- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners

Integriert + Nachrüst-Kit

- Zubehör-Option für unsere aktuellen variana Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für unsere elektrischen Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich

Mehr Sicherheit – weniger FeM*

- Schnellere Reaktionszeit bei Stürzen
- Höheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Weniger Kontrollgänge
- Ideal in Kombination mit SafeFree®-Seitensicherung

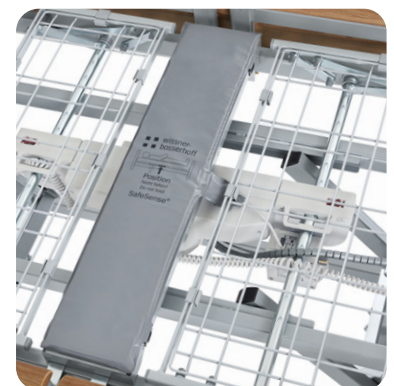

Waschbare Flexibilität

Einfache Reinigung des kompletten Bettes

Das variana Pflegebett ist in Serie ausgestattet mit dem Washability-Kit „Standard“ und ermöglicht dadurch eine flexible und schnelle Reinigung des Bettes in regelmäßigen Waschzyklen.

Erfordert der Pflegealltag aber häufigere Waschküchläge, lässt sich das variana auch mit dem Washability-Kit „Premium“ ausstatten und ist so für jede Einrichtung bedarfsgerecht konfigurierbar. So können durch die regelmäßige Reinigung des Bettes die häufigen Kontaktstellen desinfiziert und ein Beitrag zum Infektionsschutz geleistet werden.



Das variana ermöglicht eine flexible Reinigung, die perfekt auf die Bedürfnisse der Einrichtung angepasst werden kann.



Unsichtbarer Schutz: Mit dem Washability-Kit „Premium“ erhält das Bett eine zusätzliche KTL*-Beschichtung, um das Bett auch bei häufigen Waschzyklen zuverlässig zu schützen.



Komplett waschbar: Mit den neuen Kopf- & Fußteilen des variana sowie den durchgehenden und geteilten Seitensicherungen sind auch die häufigsten Kontaktflächen des Bettes komplett waschbar.

Beitrag zur Dekubitusprävention

Liegeflächen Modularitäten & Doppelter Rückzug

Der sogenannte doppelte Rückzug ist seit Jahren Bestandteil der wissner-bosserhoff Liegeflächen. Dabei wird nicht nur die Rückenlehne sondern auch die Beinlehne vom Sitzteil weg bewegt, so dass sich die Fläche vergrößert.

Ergebnisse von Druckmessungen zeigen deutlich, dass die Druckbelastung beim doppelten Rückzug erheblich geringer ist als bei einer Standardliegefläche.

ca. 37,5 %

aller Bewohner in deutschen
Alten- oder Pflegeheimen
unterliegen einem
erhöhten **Dekubitusrisiko**

Quelle: Eigene Erhebung, wissner-bosserhoff 2020


ca. 2,7 Mio.

Menschen leiden
in Deutschland
an chronischen Wunden
wie **Dekubitus**


Quelle: Studie BVMed 2012

Unsere Lösungen

WIBO-Liegefläche mit deutlicher Entlastung

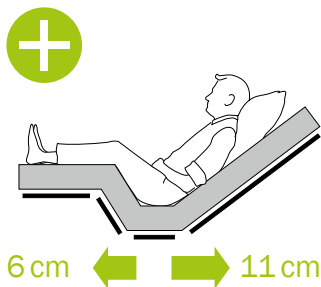


Doppelter Rückzug = Dekubitusprävention

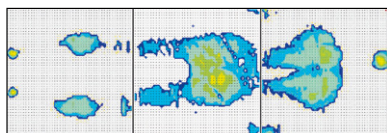


Thermografie der BiNetic-Liegefläche

Standard-Liegefläche ohne Entlastung

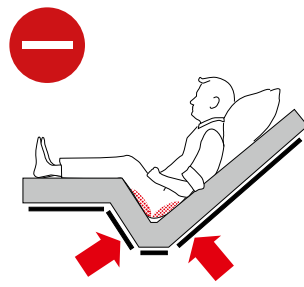

Einfacher Rückzug = Dekubitusrisiko

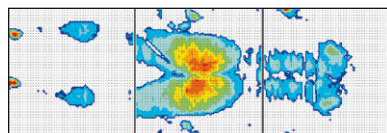

Thermografie einer Standard-Liegefläche

↓


Doppelter Rückzug =

17cm

mehr Platz im Bett!

Liegeflächen-Modularität

Sie haben 3 verschiedene Liegeflächen zur Auswahl:

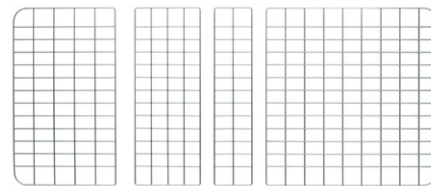


Drahtgitter Aero (Standard)

→ gute Durchlüftung



Kunststoffauflagen EasyClean

→ leicht zu reinigen

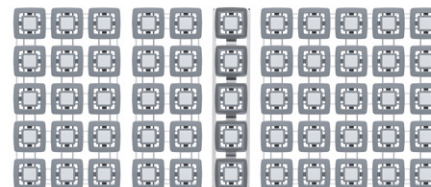

Komfort-Liegefläche, 55 Federelemente

→ hoher Liegekomfort & einfache Druckentlastung

Design | Kopf-/Fußteile

Kopfteil



Design G



Design Ts



Design V

Fußteil



Design G




Design Ts



Design V

Farben | Dekore

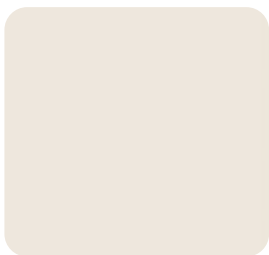

Weißgrau (U11050)



Lindberg Eiche (R20021)



Altmühlbuche (R24006)




Buche gedämpft (R24034)

Ausstattungen und Zubehör


Technische Daten

Sichere Arbeitslast	235 kg • 200 kg Bewohnergewicht • 35 kg Matratze + Zubehör
Länge x Breite	218 x 111 cm
Höhenverstellung	H1 = 34 - 82 cm H2 = 25 - 73 cm (optional mit anderem Untergestell)
Nennmaß Liegefläche	87 / 90 x 210 cm Optional: 105 x 210 cm Optional: 120 x 210 cm
Abmessungen Liegefläche	200 x 90 x 14 cm Optional 210 x 105 x 14 cm Optional 210 x 120 x 14 cm
Bremssystem	Zentralfeststellbremse mit Richtungsfeststellung
Optional	Kopf- und Fußseitig 10 cm ausziehbar

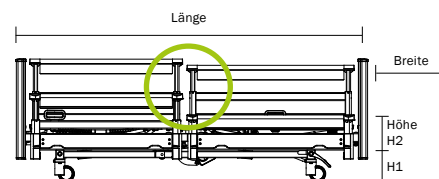


10-0910
variana


Bettverlängerungen

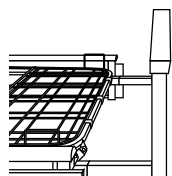

Temporäre Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Standard)

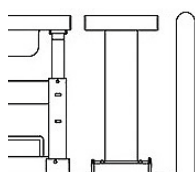

Protector für Kopf- und fußseitige Bettverlängerung um je 10 cm

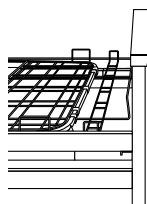


Integrierte Bettverlängerung 09er Alu-Seitensicherung teleskopierbar




3D-Wandabweisrollen horizontal und vertikal wirkend


Zubehör

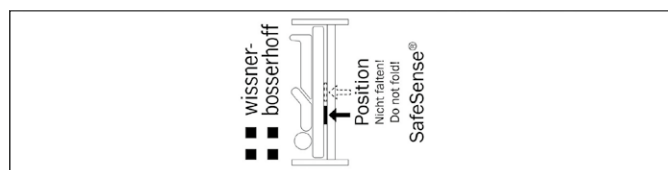


02-000876
SafeSense® Sensormatte 2.1, 80 x 20 cm

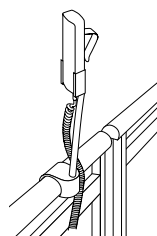


10-0913
Handschalterhalter für geteilte Seitensicherungen

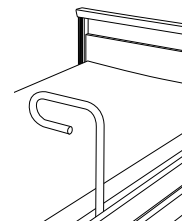

10-0715
Aufstehhilfe für 09er- und Aufstehhilfe für 09er-Seitensicherungen

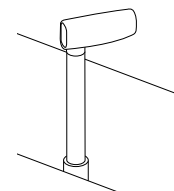

10-0634
Mobilisations-Assistent MobiStick 2

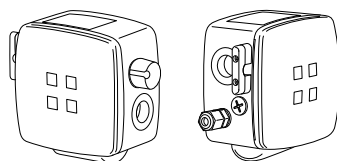

10-0812
SafeSense® Digitale Bed-Exit-Box 2.1 mit Kabel oder Funk

SafeSense®
als Set:

Sensormatte 2.1 &
Bed-Exit-Box 2.1
10-0871
Kabelversion
10-0872
Funkversion



wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Deutschland
Tel. +49 2377 784-0 | Fax -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



Bigla Care AG

Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | Switzerland
Tel.: +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

Members of LINET Group

